

Ikegami



現場が求める充実の機能

【 27型液晶モニタ 】

MLW-2760C

900cd/m²の高輝度・2画面表示対応

医療で求められる画質、色再現性と機能性を備えた高輝度、多機能モデル

医療現場が求めるクオリティを追求

高輝度で忠実な色を再現

高視野角のIPS方式で、最大輝度900cd/m²以上のLCDパネルを採用し、フルHD1920(H)×1080(V)の高精細な映像をフルカラーで表示可能。現場で求められる忠実な色を再現し、高輝度で高精細な映像表示を提供します。

前面フラットで通気孔レスデザイン

保護パネルと筐体を一体型にすることで、前面のベゼルとLCDパネルの隙間が無いフラットな構造になりました。また通気孔レスで防滴性に優れ、清掃性も向上しました。前面IP45相当、その他の面IP32相当(ケーブルカバー取り付け時のみ)

モニタに表示されている映像をそのまま外部出力可能

2画面表示など画面に表示されている映像をそのまま外部出力できます。(SDI出力のみ)

VCCI ClassB適合

電気製品から出る妨害電波を規制する自主規格であるVCCI規格の中でより厳しいClassBに適合しています。

構造強調機能:H.I.C.E.(Hyper Image Clarity Enhancer)

コントラストを補正し、視認性を向上させます。

現場が求める充実の機能と運用性

2画面表示

2種類の入力映像を、2分割画面で同時に表示するサイドバイサイド、1画面の中に別画面を表示するピクチャインピクチャが行えるため、1台で2画面を同時に確認することが可能です。



■ サイドバイサイド



■ ピクチャインピクチャ

上下左右反転

画像の上下、左右の反転が可能です。



■ 正像



■ 上下左右反転

ユーザープリセットメモリ

表示映像の種別、表示方法、映像調整値などを4種類プリセットし、読み出すことが可能です。設定および調整の省力化が図れます。

ファンクションキー

使用頻度の高い機能をファンクションキーに登録し、即座に呼び出すことができます。

■ 主な仕様

【定格・性能】

LCD/パネル	LCD/パネルサイズ	27型
	バックライト方式	LED
	有効画面サイズ	597.9(H)×336.3(V)mm
	視野角	上下、左右178°以上
環境条件	最大輝度	900cd/m ² typ.(Ta=25℃)
	コントラスト比	1000:1typ
	表示解像度	最大1920(H)×1080(V)
	表示色	107374万色
電源入力仕様	作動温度/湿度	+5℃～+35℃/30%～80%(非結露)
	保存温度/湿度	-20℃～+60℃/30%～90%(非結露)
インターフェース	電圧	DC IN: 24V(ACアダプタ)
	消費電力	65W
	DVI入力	信号およびコネクタ DVI-D: 1系統
	SDI入力	信号およびコネクタ BNC: 2系統(SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI入力用)
インターフェース	SDI出力	信号およびコネクタ BNC: 1系統(Monitor-Out/Loop through出力用)
	HDMI入力	信号およびコネクタ HDMI: 1系統
	シリアルコントロール	コネクタおよび機能 9pin D-sub メス型(凹型)
	USB 2.0	コネクタおよび機能 外部リモートコントロール
インターフェース	コネクタおよび機能	USB(Type-A) ファームウェアアップデート(メンテナンス用)

【信頼性・安全性】

安全規格	UL	ANSI/AAMI ES60601-1
	CE-safety	CAN/CSA C22.2 NO.60601-1:14
磁界環境両立性 (EMC規格)	FCC-PART15	EN60601-1:2006+A1:2013 +A12:2014 +A2:2021
	VCCI-CISPR 32	Class B
	CE-EMC	Class B
		EN60601-1-2:2015

【外観】

質量	約8.0kg(スタンド含まず)
外形寸法	W658×H418×D76.4mm
スタンド取り付け	VESA規格(100mm×100mm)

【付属品】


電源コード、ACアダプタ、取扱説明書、VESA用ネジ

【表示フォーマット】


HDMI	480/59.94i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA(Vf=60Hz)
DVI-D	480/59.94i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA(Vf=60Hz) ※8bitのみ対応可能です。
SDI	480/59.94i, 575/50i, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p

※詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

■ コネクタ部

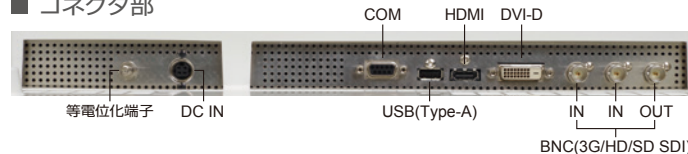

■ 外観図(mm)

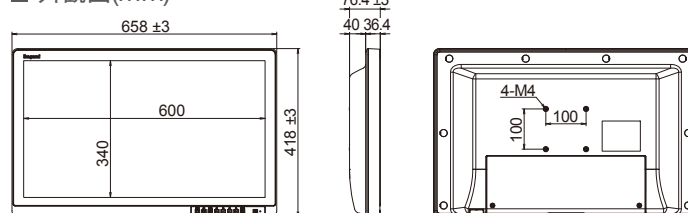

■ アクセサリ



※ACアダプタをモニター本体に取り付けるときに使用します。

安全上のご注意：ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

- 液晶/パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画面上に黒い点(画素欠け)、常時点灯する輝点(赤、青、緑など)や点灯しない減点が出る場合がありますが、故障ではありませんのでご了承ください。
- 液晶/パネルは固定された明るい画像や静止画などの長時間連続表示、高温多湿環境下で連続使用されますと、残像、焼付きなどが発生することがあり、液晶/パネルの経年変化を早めます。固定された明るい画像や静止画などは長時間連続表示しない、あるいは輝度を下げることをおすすめします。また、お使いにならない場合は、本機の電源をお切りいただくことをおすすめします。
- 本カタログ掲載製品は医療機器ではありません。

ご購入後、安心してお使いいただける保守プラン

- システム総合プラン ●定期点検プラン ●その他ご要望に合わせたカスタマイズプラン ※お気軽にお問い合わせください。



- 環境保全のため、FSC®認証紙と植物油インキを使用し印刷しています。

Ikegami



ISO 9001 認証
JQA-0755



ISO 14001 認証
JQA-EM3888

池上通信機株式會社

本社：〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16
TEL：(03)5700-1111

お問い合わせは

■ www.ikegami.co.jp

営業・サービス本部：〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211代表
大阪支店：〒564-0052 吹田市広芝町9-6第1江坂池上ビル ☎(06)6389-2833
名古屋支店：〒465-0051 名古屋市名東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521代表
札幌営業所：〒060-0031 札幌市中央区北1条東2丁目5-2札幌泉第2ビル5F ☎(011)231-8218代表
仙台営業所：〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲町西1-14富士フィルム仙台ビル6F ☎(022)292-2420代表
福岡営業所：〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-7-10STビル4F ☎(092)451-2521代表

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。